


Accufuser®

シリコンバルーンインフューザー

アキュフューザー

医療機器承認番号：22700BZX00212000

ISO80369-6対応

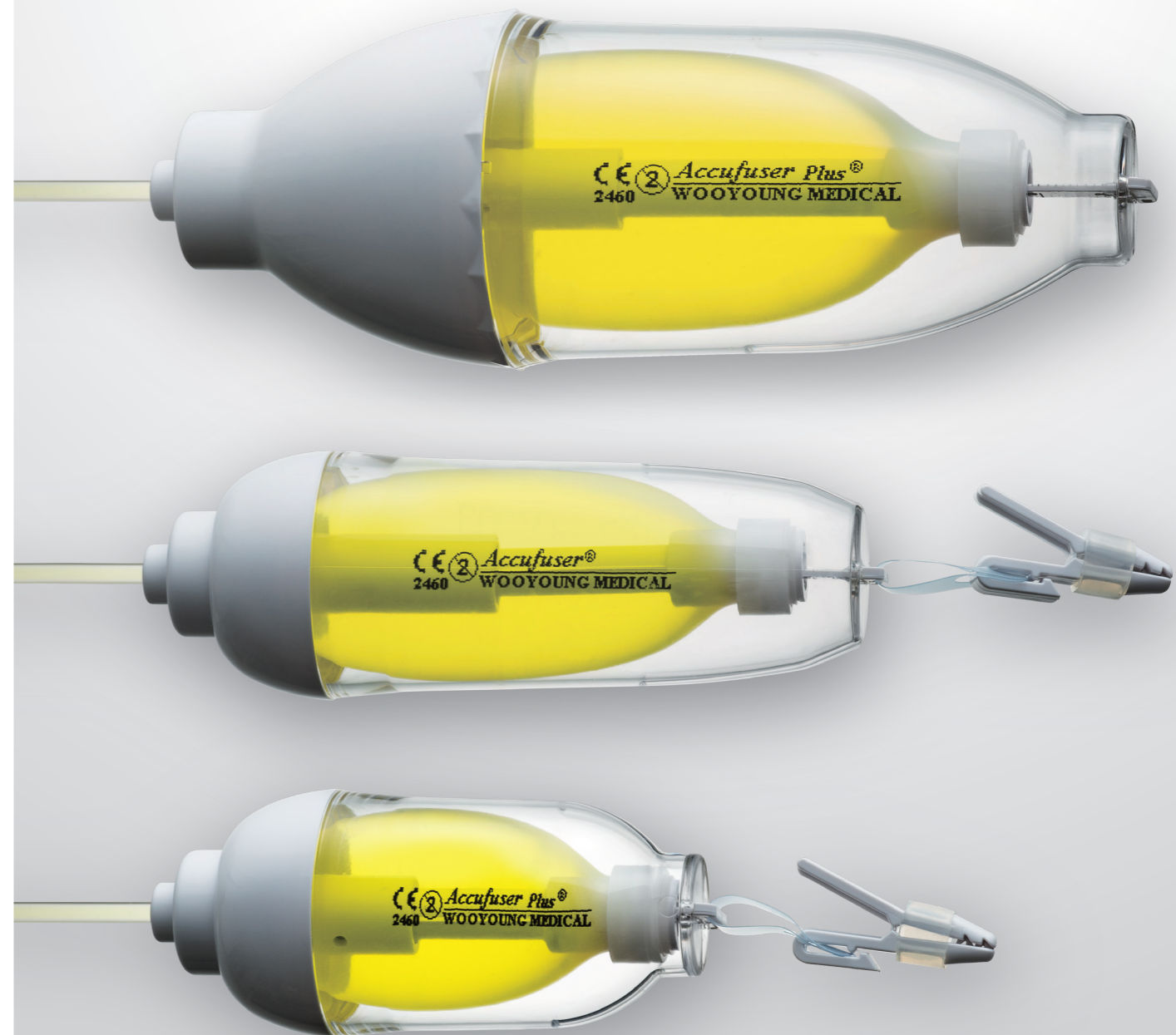

持続注入ポンプ・ボラス注入付加タイプ



ISO80369-6対応

容量 (mL)	持続流速 (mL/hr)	ボラス流量 (mL)	プッシュボタン色	ロックアウト時間(分)	WYM No.	品目コード	JANコード
60	0.5	0.5	青	15	P0515S-6	800 001 6151	4542187218145
	1.0				P1015S-6	800 001 6152	4542187218152
	2.0				P2015S-6	800 001 6153	4542187218169
	0.5	60	青	15	P0560S-6	800 001 6154	4542187218176
	2.0				P2060S-6	800 001 6155	4542187218183
	1.0				M1015S-6	800 001 6130	4542187217933
100	2.0	1.0	緑	15	M2015S-6	800 001 6131	4542187217940
	1.0				M1060S-6	800 001 6132	4542187217957
	2.0				M2060S-6	800 001 6133	4542187217964
	0.5	0.5	青	15	P0515M-6	800 001 6156	4542187218190
	1.0				P1015M-6	800 001 6157	4542187218206
	2.0				P2015M-6	800 001 6158	4542187218213
100	0.5	1.0	緑	60	P0560M-6	800 001 6159	4542187218220
	1.0				M1015M-6	800 001 6134	4542187217971
	2.0				M2015M-6	800 001 6135	4542187217988
	1.0	2.0	白	15	M1060M-6	800 001 6136	4542187217995
	2.0				M2060M-6	800 001 6137	4542187218008
	2.0				T2015M-6	800 001 6140	4542187218039
300	4.0	2.0	白	15	T4015M-6	800 001 6141	4542187218046
	5.0				T5015M-6	800 001 6142	4542187218053
	2.0				T2060M-6	800 001 6143	4542187218060
	4.0	60	白	15	T4060M-6	800 001 6144	4542187218077
	5.0				T5060M-6	800 001 6145	4542187218084
	1.0				M1015L-6	800 001 6138	4542187218015
300	2.0	1.0	緑	15	M2015L-6	800 001 6139	4542187218022
	2.0				T2015L-6	800 001 6146	4542187218091
	4.0				T4015L-6	800 001 6147	4542187218107
	5.0	2.0	白	15	T5015L-6	800 001 6148	4542187218114
	4.0				T4060L-6	800 001 6149	4542187218121
	5.0				T5060L-6	800 001 6150	4542187218138

10個 / 箱・滅菌済

持続注入ポンプタイプ



ISO80369-6対応

容量 (mL)	持続流速 (mL/hr)	ラベル色	使用時間(日)	WYM No.	品目コード	JANコード
60	0.5	● レッド	5.0	C0005S-6	800 001 6160	4542187218237
	1.0	● ブルー	2.5	C0010S-6	800 001 6161	4542187218244
	2.0	● イエロー	1.2	C0020S-6	800 001 6162	4542187218251
100	0.5	● レッド	8.3	C0005M-6	800 001 6163	4542187218268
	1.0	● ブルー	4.1	C0010M-6	800 001 6164	4542187218275
	2.0	● イエロー	2.0	C0020M-6	800 001 6165	4542187218282
300	4.0	● オレンジ	1.0	C0040M-6	800 001 6166	4542187218299
	2.0	● イエロー	6.2	C0020L-6	800 001 6167	4542187218305
	4.0	● オレンジ	3.1	C0040L-6	800 001 6168	4542187218312
	5.0	● グリーン	2.5	C0050L-6	800 001 6169	4542187218329

10個 / 箱・滅菌済

別売り(雑品)

アキュフューザー用ポーチ



カラー	品目コード	JANコード
白	800 001 3855	4542187195248
黄	800 001 3856	4542187195255

10枚 / 袋・未滅菌


製造販売元

クリエートメディック株式会社
CREATE MEDIC

本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25
ホームページ <http://www.createmedic.co.jp>


製造元

WYM WOORYOUNG MEDICAL CO., LTD.



※バルーンの内容物は薬液のかわりに着色液を使用しております。

CREATE MEDIC CO., LTD.
CREATE MEDIC

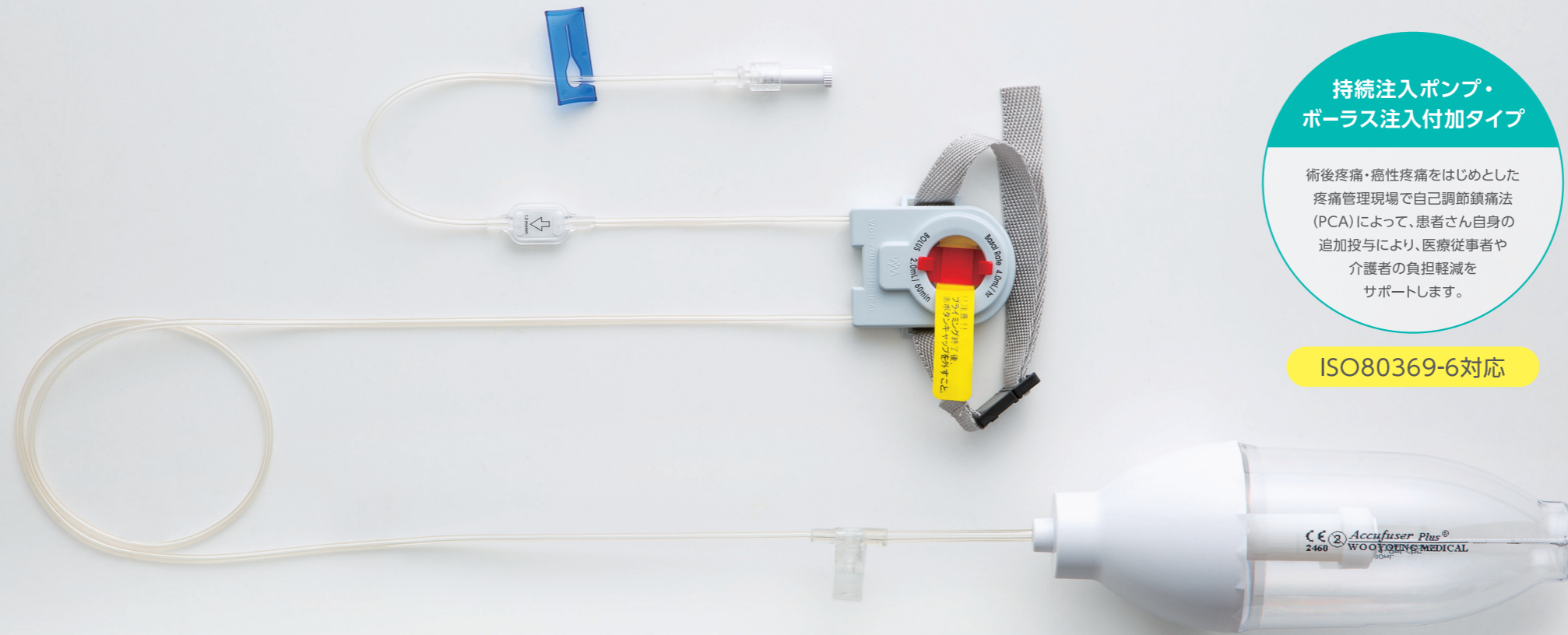

持続注入ポンプ・
ボラス注入付加タイプ

術後疼痛・癌性疼痛をはじめとした疼痛管理現場で自己調節鎮痛法 (PCA) によって、患者さん自身の追加投与により、医療従事者や介護者の負担軽減をサポートします。

ISO80369-6対応

シンプルな
デザインと
安定した性能



持続注入ポンプ・
ボラス注入付加タイプ

一体型

ボラススイッチ (PCA装置) を注入ラインと一体化することで、接続の手間を省略し誤接続や接続部分からの感染の危険性を軽減しています。

使いやすさにこだわって



ボラススイッチ (PCA装置)

プライミング操作の簡略化による、効率的な治療準備を

Easy Priming System 持続注入ポンプ・ボラス注入付加タイプ

ボラス投与を行う際、リザーババッグ (PCAバッグ) から薬液を放出する方法として、クランク・クランプ式構造を採用しました。クランク・クランプ式構造とボタンキャップ (PCAキャップ) により、プライミング時間を短縮することが可能となりました。

持続注入ポンプ・
ボラス注入付加タイプ
持続注入ポンプタイプ




IVフィルター

親水性メンブレンと疎水性メンブレンを配したフィルターにより、エアを逃がし、エアブロックの発生を軽減します。

持続注入ポンプ
タイプ

定められた速度でシンプルな使用感が求められる現場でその効力を発揮します。

ISO80369-6対応

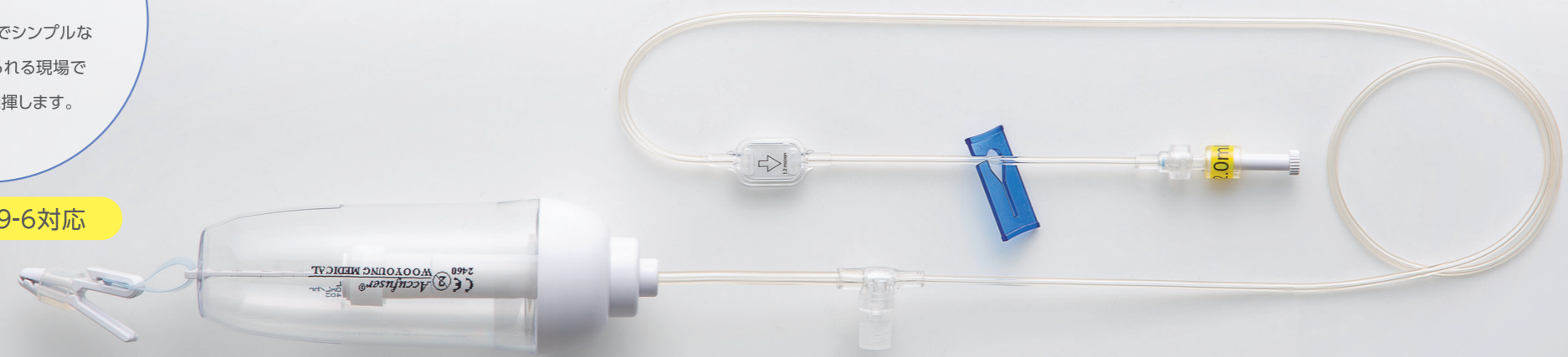

注: リザーバケース内にある目盛はあくまでも目安です。
正確な薬液の残量を確認する場合は重量計測により確認してください。