

キット内容



- ①カテーテル
- ②ガイドワイヤー
- ③潤滑剤

製品規格

胃瘻クリニカルキット (フラットカテーテルGW付)

品目コード	サイズ呼称	規定容量	全長 (mm)	JANコード
8000010871	12Fr	10mL	225	4542187164381
8000010872	14Fr	10mL	225	4542187164398
8000010873	16Fr	10mL	225	4542187164404
8000010874	18Fr	15mL	225	4542187164411
8000010875	20Fr	15mL	225	4542187164428
8000010876	22Fr	20mL	225	4542187164435
8000010877	24Fr	20mL	225	4542187164442

- 仕様 (カテーテル ・X線造影ライン ・先端開孔 ・バルーン後端から20~100mmまで10mm間隔のデプスマーク  
 ガイドワイヤー ・全長600mm 外径1.32mm(0.052") ・固定式ストレート(先端軟化型)  
 ・先端から100mm間隔のデプスマーク)
- 包装 ————— ・2キット/箱 ・滅菌済

弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。  
 予めご了承ください。  
 ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

営業所一覧

札幌営業所	TEL:011(727)5611	FAX:011(727)8990	盛岡出張所	TEL:019(606)1020	FAX:019(606)1022
仙台営業所	TEL:022(234)2541	FAX:022(234)2530	さいたま営業所	TEL:048(640)6161	FAX:048(640)6162
東京営業所	TEL:03(3815)7861	FAX:03(3815)7943	千葉出張所	TEL:04(7141)2945	FAX:04(7141)2946
横浜営業所	TEL:045(943)2617	FAX:045(943)2618	名古屋営業所	TEL:052(238)5670	FAX:052(241)5033
金沢出張所	TEL:076(260)1085	FAX:076(260)1086	大阪営業所	TEL:06(6944)0401	FAX:06(6944)0400
神戸営業所	TEL:078(341)0488	FAX:078(341)0487	広島営業所	TEL:082(261)5401	FAX:082(261)5402
福岡営業所	TEL:092(474)9911	FAX:092(474)9912	鹿児島出張所	TEL:099(250)6391	FAX:099(250)6392

製造販売元 クリエイトメディック株式会社  
 本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25

<http://www.createmedic.co.jp>

胃瘻クリニカルキット  
 (フラットカテーテルGW付)

医療機器認証番号 220AABZX00342000

ガイドワイヤーでさらなる安全と安心を

# 胃瘻クリニカルキット

(フラットカテーテル GW 付)

医療機器認証番号 220AABZX00342000



## より安全でスムーズなカテーテル交換を目指して

交換の際、腹腔内へのカテーテル誤挿入のリスクを低減するために、ガイドワイヤーをキットに添付しました。


### コシのある0.052"のガイドワイヤー

カテーテルへの追従性と胃内への穿刺リスク等を考慮した、先端柔軟性に優れたガイドワイヤーです。

- 全長600mm 外径1.32mm(0.052")
- 固定式ストレート(先端軟化型)
- 先端から100mm間隔のデプスマーク



### カテーテルの先端突出を無くしたバルーン形状

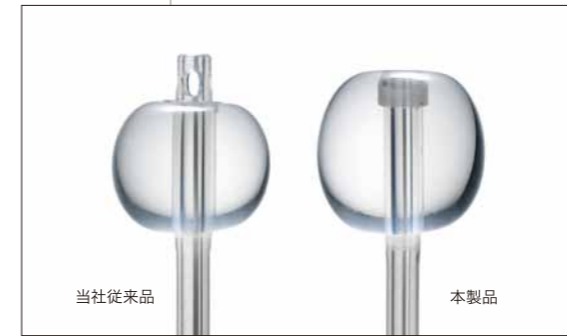

特殊な形状加工により、先端突出が無いバルーン形状を実現しました。先端が胃後壁に触れにくく、接触性潰瘍のリスクを軽減します。

### 挿入性向上のためのフラット構造

チューブとバルーン部分の段差を無くしたフラット構造で挿入抵抗が低減したことにより、交換に伴う患者様の負担が軽減されます。



付属の潤滑剤で、更に挿入抵抗が低減します。



### 従来に比べて大容量になったバルーン



当社従来品と比較して、バルーン容量が多くなりました。