


BLUNERO

内視鏡用ガイドワイヤ ブルネロ

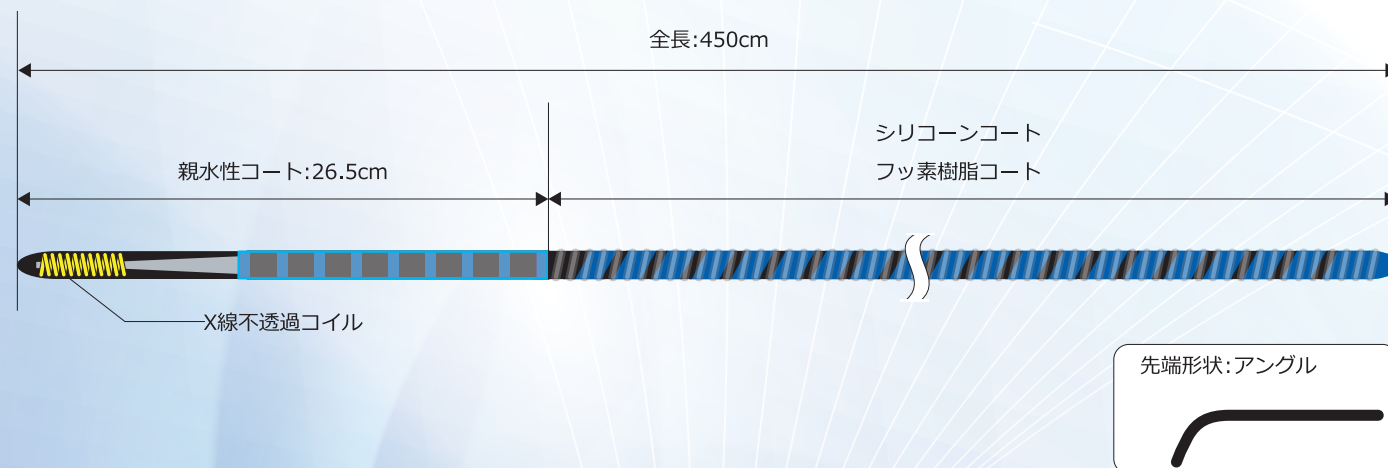

品目コード	外径	先端形状	全長	JANコード
800-002-0600	0.64mm(0.025inch)	アングル	450cm	4542187245240

※弊社は常に研究開発を行っておりますので、製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。

※ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読ください。


1本/箱・滅菌済

販売名:内視鏡用ガイドワイヤ ブルネロ

医療機器認証番号:305AABZX00072000

製造販売元: **クリエートメディック株式会社**

ホームページ:<https://www.createmedic.co.jp>

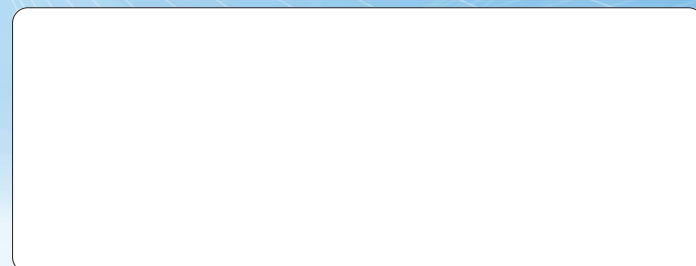

消-119-A 2024.5.6,000



BLUNERO

内視鏡用ガイドワイヤ ブルネロ



内視鏡用ガイドワイヤに求められるシーキング性能と摺動性を追求し、 内視鏡手技を幅広くカバーします。

緻密に設計された凹凸表面と各コーティング間の段差を限りなく低減したシームレス仕様により、
シーキング性能と摺動性の向上を目指しました。

Point 1

長めの先端テーパー形状


柔軟性のある先端部分は、
目的部位へのアクセスやループ形成を容易に行うことができ、
優れた**シーキング性能と安全性**に貢献します。



Point 2

3種類のコーティング&シームレス表面仕様

先端から手元まで3種類のコーティングを使い分け、
段差を少なく仕上げることで併用デバイスとの摩擦抵抗を軽減し
高い**摺動性**と**耐久性**を追求しました。

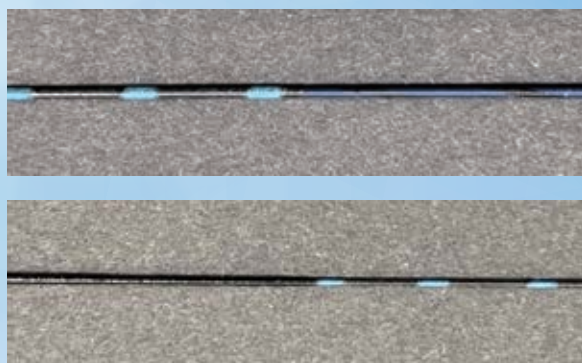

Point 3

細径0.025inchの高剛性Ni-Tiコアワイヤ


独自の芯線加工により、回転操作をダイレクトに伝える
高い**トルク性能**を発揮し、適度なコシが**狭窄突破性**と
スムーズなデバイス挿入をサポートします。

Point 4

DAS Surface

耐久性(Durable)と滑性(Smooth)を兼ね備えた
DAS Surface(Durable and Smooth Surface)。
凹凸の高さ・幅・ピッチの最適化された表面が
シーキング性能を向上させます。
さらに、表面に塗布されたシリコンコートが摩擦抵抗を抑制します。

拡大図

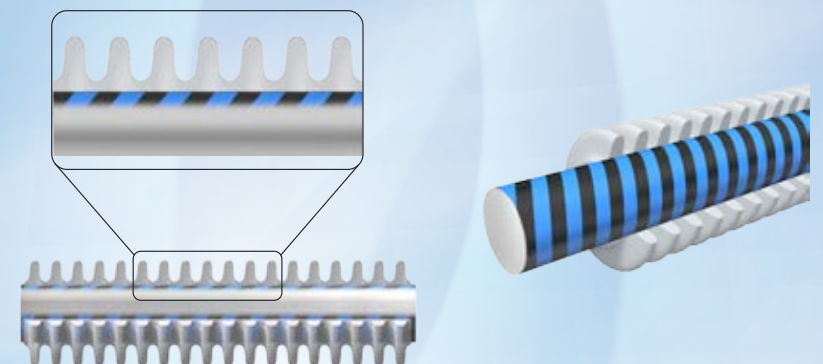

Point 5

青と黒のガイドワイヤデザイン

製品名の由来となった青(BLU)と黒(NERO)の
ストライプ模様とスパイラル模様が内視鏡下での**視認性**を高めます。