


# クリニー トラキオストミーチューブ

一重管 / 二重管



気管にやさしい  
気管切開  
チューブ

- 当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品の仕様を一部変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用に際しては、必ず電子添文をご一読ください。
- イラストはイメージ図であり、製品と異なる部分があります。ご了承ください。

 クリエイトメディック株式会社

本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25  
ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>

# 「やさしさ」と「性能」へのこだわり

## ポリ塩化ビニルよりも柔らかい シリコンゴムで出来た気管切開チューブ

柔軟で気管にやさしく、かつ耐キック性に優れたカニューレチューブを  
2種類のシリコンが可能にしました。



### ネックプレート

頸部への違和感・負担を軽減させるため、  
柔軟なシリコン素材を使用。

### サククションチューブ(カフ上部吸引機能)



- 効果的な吸引効率を実現
- 気管に接触して吸引口が塞がれないよう  
背面より、やや側面に設置
- 吸引口をカフ上部に近づけたことにより、  
吸引効率を向上

### 人工呼吸器関連肺炎(VAP)と上部吸引機能の優位性について

カフ部の上部吸引機能が付いている事で、カフ部上部に溜まっている分泌液を吸引することが出来ます。それにより気管を清潔に保つ事が可能です。また、下気道への細菌の侵入を防ぐ事でVAP発症率の軽減に繋がります。



### 二重管

インナーカニューレのみを取り出し内腔に付着した分泌物を除去できるため、  
分泌物が多くチューブ内腔が閉塞しやすい患者、気管切開の期間が長い患者に  
有用と言われております。

### インナーカニューレについて

- カニューレチューブの柔らかさを活かすため、  
屈曲部に蛇腹タイプのインナーカニューレを採用。
- インナーカニューレの視認性向上のため、  
キャップにネックプレートと同じ淡い黄色を配色。
- 挿入性向上のため、キャップ側にストレート部を設けて  
挿入時の変形を防止。
- ストレート部にサイズ表記。  
(outer表示がカニューレチューブ内径に合致します。)



### 2種類のシリコンを採用

カニューレチューブ

### コシのあるシリコン

頸部の屈曲等による、キックを軽減するため、  
コシのある適度な硬さのシリコン素材を使用。

### 柔軟なシリコン

気管への負担を低減するため、  
柔軟でシワの出来にくいシリコン素材を使用。

### LEAK BLOCK

『LEAK BLOCK』により、  
カフのエアホールド力を追求し、  
気体透過性を低く設計しています。

LEAK BLOCK エア注入による  
カフ部の経時変化

| 経過時間 (h) | LEAK BLOCK (シリコン製) (カフ外径%) | A社 (シリコン製) (カフ外径%) |
|----------|----------------------------|--------------------|
| 0        | 100.00                     | 100.00             |
| 3        | 98.00                      | 95.00              |
| 6        | 96.00                      | 90.00              |
| 12       | 94.00                      | 88.00              |
| 15       | 93.49                      | 86.00              |
| 18       | 93.49                      | 85.65              |
| 24       | 93.49                      | 85.65              |

※当比較試験は当社試験になります。スタート時(0時間)にカフの内圧が、50mmHgになるまでカフを膨らませます。  
その後、設定した測定時間毎にカフの外径を測定し、経過時間に対するカフ外径の測定値を比較しました。

# クリニー トラキオストミーチューブ

一重管



## 規格

クリニー  
トラキオストミーチューブ  
(カフ付き・上部吸引あり)

医療機器認証番号:222AABZX00094000



| 品目コード        | 内径(mm) | 外径(mm) | 長さ(mm) | JANコード        |
|--------------|--------|--------|--------|---------------|
| 800 001 0985 | 5.0    | 7.3    | 57.0   | 4542187169829 |
| 800 001 0986 | 6.0    | 8.7    | 63.0   | 4542187169836 |
| 800 001 0987 | 7.0    | 10.0   | 71.0   | 4542187169843 |
| 800 001 1578 | 7.5    | 10.7   | 73.0   | 4542187172409 |
| 800 001 0988 | 8.0    | 11.0   | 75.0   | 4542187169850 |
| 800 001 1579 | 8.5    | 11.7   | 78.0   | 4542187172416 |
| 800 001 0989 | 9.0    | 12.3   | 80.0   | 4542187169867 |
| 800 001 0990 | 9.5    | 13.3   | 83.0   | 4542187169874 |

5本/箱・EOG滅菌済

クリニー  
トラキオストミーチューブ  
(カフ付き・上部吸引なし)

医療機器認証番号:222AABZX00094000



| 品目コード        | 内径(mm) | 外径(mm) | 長さ(mm) | JANコード        |
|--------------|--------|--------|--------|---------------|
| 800 001 2520 | 5.0    | 7.3    | 57.0   | 4542187181937 |
| 800 001 2521 | 6.0    | 8.7    | 63.0   | 4542187181944 |
| 800 001 2522 | 7.0    | 10.0   | 71.0   | 4542187181951 |
| 800 001 2523 | 7.5    | 10.7   | 73.0   | 4542187181968 |
| 800 001 2524 | 8.0    | 11.0   | 75.0   | 4542187181975 |
| 800 001 2525 | 8.5    | 11.7   | 78.0   | 4542187181982 |
| 800 001 2526 | 9.0    | 12.3   | 80.0   | 4542187181999 |
| 800 001 2527 | 9.5    | 13.3   | 83.0   | 4542187182002 |

5本/箱・EOG滅菌済

クリニー  
トラキオストミーチューブ  
(カフなし)

医療機器認証番号:222AABZX00094000



| 品目コード        | 内径(mm) | 外径(mm) | 長さ(mm) | JANコード        |
|--------------|--------|--------|--------|---------------|
| 800 001 2512 | 5.0    | 7.3    | 57.0   | 4542187181852 |
| 800 001 2513 | 6.0    | 8.7    | 63.0   | 4542187181869 |
| 800 001 2514 | 7.0    | 10.0   | 71.0   | 4542187181876 |
| 800 001 2515 | 7.5    | 10.7   | 73.0   | 4542187181883 |
| 800 001 2516 | 8.0    | 11.0   | 75.0   | 4542187181890 |
| 800 001 2517 | 8.5    | 11.7   | 78.0   | 4542187181906 |
| 800 001 2518 | 9.0    | 12.3   | 80.0   | 4542187181913 |
| 800 001 2519 | 9.5    | 13.3   | 83.0   | 4542187181920 |

5本/箱・EOG滅菌済

付属品  
衛材セット



カットガーゼ  
パッドA



カットガーゼ  
パッドB



布テープ  
(頸部固定テープ)

# クリニー トラキオストミーチューブ

二重管



## 規格

クリニー  
トラキオストミーチューブ  
(二重管 カフ付き・上部吸引あり)

医療機器認証番号:222AABZX00094000



| 品目コード        | 気管切開チューブ |        |        | インナーカニューレ<br>内径(mm) | JANコード        |
|--------------|----------|--------|--------|---------------------|---------------|
|              | 内径(mm)   | 外径(mm) | 長さ(mm) |                     |               |
| 800 001 5870 | 7.0      | 10.0   | 71.0   | 5.5                 | 4542187215335 |
| 800 001 5871 | 7.5      | 10.7   | 73.0   | 6.0                 | 4542187215342 |
| 800 001 5872 | 8.0      | 11.0   | 75.0   | 6.5                 | 4542187215359 |
| 800 001 5873 | 8.5      | 11.7   | 78.0   | 7.0                 | 4542187215366 |
| 800 001 5874 | 9.0      | 12.3   | 80.0   | 7.5                 | 4542187215373 |

5本/箱・EOG滅菌済

クリニー  
トラキオストミーチューブ  
(二重管 カフなし)

医療機器認証番号:222AABZX00094000



| 品目コード        | 気管切開チューブ |        |        | インナーカニューレ<br>内径(mm) | JANコード        |
|--------------|----------|--------|--------|---------------------|---------------|
|              | 内径(mm)   | 外径(mm) | 長さ(mm) |                     |               |
| 800 001 5858 | 7.0      | 10.0   | 71.0   | 5.5                 | 4542187215212 |
| 800 001 5859 | 7.5      | 10.7   | 73.0   | 6.0                 | 4542187215229 |
| 800 001 5860 | 8.0      | 11.0   | 75.0   | 6.5                 | 4542187215236 |
| 800 001 5861 | 8.5      | 11.7   | 78.0   | 7.0                 | 4542187215243 |
| 800 001 5862 | 9.0      | 12.3   | 80.0   | 7.5                 | 4542187215250 |

5本/箱・EOG滅菌済

クリニー  
トラキオストミーチューブ  
(インナーカニューレ)

医療機器認証番号:222AABZX00094000



| 品目コード        | 呼称   | 内径(mm) | 有効長(mm) | JANコード        |
|--------------|------|--------|---------|---------------|
| 800 001 5864 | 7.0用 | 5.5    | 102.5   | 4542187215274 |
| 800 001 5865 | 7.5用 | 6.0    | 104.5   | 4542187215281 |
| 800 001 5866 | 8.0用 | 6.5    | 106.5   | 4542187215298 |
| 800 001 5867 | 8.5用 | 7.0    | 109.5   | 4542187215304 |
| 800 001 5868 | 9.0用 | 7.5    | 111.5   | 4542187215311 |

5本/箱・EOG滅菌済

付属品  
衛材セット



カットガーゼ  
パッドA



カットガーゼ  
パッドB



布テープ  
(頸部固定テープ)

# クリニー トラキオストミーチューブ 関連製品

雑品

クリニー トラキガード  
(気管切開チューブ固定ホルダー)



| 品目コード        | 規格           | JANコード        |
|--------------|--------------|---------------|
| 800 001 6585 | 45.0cm×3.5cm | 4580341153109 |

20個/箱・未滅菌

雑品

クリニー トラキオストミーチューブ用  
ネックホルダー



| 品目コード        | サイズ呼称 | 長さ(cm) | 幅(cm) | JANコード        |
|--------------|-------|--------|-------|---------------|
| 800 001 3162 | S     | 23     | 3     | 4580341153017 |
| 800 001 3163 | M     | 47     | 3     | 4580341153024 |
| 800 001 3164 | L     | 60     | 3     | 4580341153031 |


12個/箱・未滅菌

## 特長と利点




- 01 気管切開チューブのコネクタ部をOリングで抑えてチューブの飛び出しを防ぎます。
- 02 呼吸回路のコネクタ部をマジックテープが固定してコネクタの脱落を防ぎます。
- 03 首回り18cmから46cmまで適応でき、全ての気管切開チューブにご利用いただけます。
- 04 1患者につき、1回使用の Disposable 商品です。
- 05 呼吸回路をネックホルダーに固定しますので、回路に加わった力をネックホルダーに逃がします。


## 使用方法

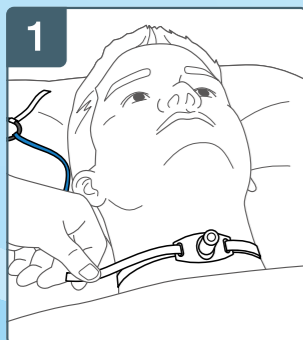

1  
ネックホルダーで  
チューブを固定します。

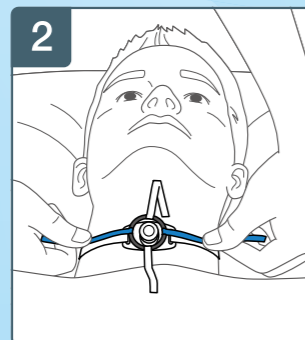

2  
Oリングで  
チューブを抑えます。

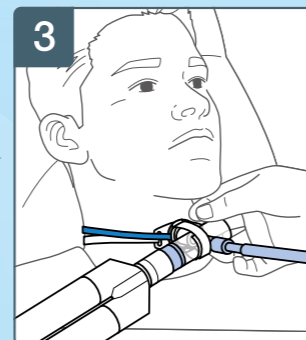

3  
マジックテープで  
回路を固定します。



QRコードから、  
使用方法の動画を  
ご覧いただけます。

## 気管切開チューブ (B型)

綿テープ、ガーゼ付属

医療機器承認番号: 15900BZZ00179000



| 品目コード        | 呼称   | 内径 (mm) | 外径 (mm) | カニューレ長 (mm) | JANコード        |
|--------------|------|---------|---------|-------------|---------------|
| 004 020 0050 | 22Fr | 5.0     | 7.3     | 59          | 4542187008357 |
| 004 020 0060 | 26Fr | 6.0     | 8.7     | 70          | 4542187008364 |
| 004 020 0070 | 30Fr | 7.0     | 10.0    | 75          | 4542187008371 |
| 004 020 0080 | 33Fr | 8.0     | 11.0    | 81          | 4542187008388 |
| 004 020 0090 | 37Fr | 9.0     | 12.3    | 92          | 4542187008395 |

5本/箱・EOG滅菌済